

Congratulations!

You are now on your way to better oral health!

REGISTER AND SAVE

Register your product and receive over \$50 in savings. waterpik.com/registration/US or waterpik.ca/registration/CA.

WE'RE HERE TO HELP

We hope you are loving your new Water Flosser. If for any reason you are not satisfied or have any product questions, please contact our fast and friendly Customer Service Team based in Fort Collins, Colorado.



Call: 1-800-525-2774 (USA)
1-888-226-3042 (Canada)
Monday-Friday
7 am - 5 pm MST

Chat or E-mail
service@waterpik.com

INSTRUCTION MANUAL INSIDE →

Waterpik® Water Flosser
Models WF-16/WF-17 Series

LET US HELP YOU GET STARTED!
We have many helpful tools to provide you with the best possible experience. Scan either QR code below or visit: waterpik.com/slides/US waterpik.ca/slides/CA



QUICK START GUIDE INSIDE →

SAFEGUARD STATEMENTS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

- This product is for household use.

When using electrical products, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

DANGER:

To reduce the risk of electrocution:

- Do not handle the user supplied USB charger with wet hands.
- Do not place or drop the user supplied USB charger into water or other liquid.
- Check the charging cord and user supplied USB charger for damage before the first use and during the life of the product.

Quick Start Guide

GETTING STARTED

- Connect the charging cable to user supplied USB charger. Plug the charger into the wall outlet, then connect the other end of the charging cable to the unit, and charge.

Charge Unit for 4 Hours Prior to First Use.



- Lift the flip top on reservoir and fill with lukewarm water. Refill as needed.

Ensure contacts on BOTH the cable and unit are clean and dry, and the reservoir is emptied and reset (close to the collapsed port) before connecting the charger.



WARNING:

To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

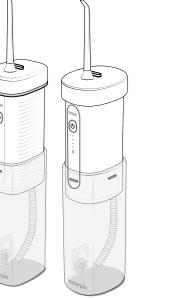
- Use this product only as indicated in these instructions or as recommended by your dental professional.
- A user supplied USB charger with the following specifications is required to charge this product: USB Type-A, Rated Output: 5.0 VDC, 1.0 A.
- Do not plug this device into a voltage system that is different from the voltage system specified on the device or charger.
- Keep the charging cord and user supplied USB charger away from heated surfaces.
- Unplug USB charger when not in use.
- Do not use the Water Flosser for more than 5 minutes in each two hour period.

Félicitations!

Vous êtes maintenant sur la voie d'une meilleure santé buccodentaire!

ENREGISTREZ VOTRE APPAREIL ET FAITES DES ÉCONOMIESEnregistrez votre produit et bénéficiez de plus de 50 \$ d'économies. waterpik.ca/enregistrement**NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER**

Nous espérons que vous êtes satisfait(e) de votre nouvel hydropulseur. Si, pour quelque raison que ce soit, vous n'êtes pas satisfait(e) du produit ou si vous avez des questions sur le produit, veuillez contacter notre équipe du Service à la clientèle, rapide et amicale, basée à Fort Collins, Colorado.

Téléphonez au : 1-888-226-3042
Du lundi au vendredi
De 7 h à 17 h (HNR)Par clavardage ou courriel à :
service@waterpik.com**MODE D'EMPLOI À L'INTÉRIEUR →****Hydropulseur Waterpik® - Modèles WF-16/WF-17****LAISSEZ-NOUS VOUS AIDER À DÉMARRER!**Nous mettons à votre disposition de nombreux outils utiles pour vous garantir la meilleure expérience possible. Scannez le code QR ci-dessous ou visitez le site : waterpik.ca/slideFR**En Français****GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE À L'INTÉRIEUR →**

ÉNONCÉS DE SÉCURITÉ

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION.**ENREGISTREZ VOTRE APPAREIL ET FAITES DES ÉCONOMIES**Enregistrez votre produit et bénéficiez de plus de 50 \$ d'économies. waterpik.ca/enregistrement**NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER**

Nous espérons que vous êtes satisfait(e) de votre nouvel hydropulseur. Si, pour quelque raison que ce soit, vous n'êtes pas satisfait(e) du produit ou

si vous avez des questions sur le produit, veuillez contacter notre équipe du Service à la clientèle, rapide et amicale, basée à Fort Collins, Colorado.

Téléphonez au : 1-888-226-3042
Du lundi au vendredi
De 7 h à 17 h (HNR)Par clavardage ou courriel à :
service@waterpik.com**MODE D'EMPLOI À L'INTÉRIEUR →**

Guide de démarrage rapide

POUR COMMENCER

- 1** Raccordez le câble de recharge au chargeur USB fourni par l'utilisateur. Branchez le chargeur dans la prise murale, branchez l'autre extrémité du câble de recharge à l'unité, puis laissez l'appareil charger.

Laissez l'appareil charger pendant 4 heures avant la première utilisation.**Scannez le code QR ci-dessous ou visitez le site : waterpik.ca/slideFR****GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE À L'INTÉRIEUR →**

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de brûlure, d'électrocution, d'incendie, ou de blessure aux personnes :

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION.**ENREGISTREZ VOTRE APPAREIL ET FAITES DES ÉCONOMIES**Enregistrez votre produit et bénéficiez de plus de 50 \$ d'économies. waterpik.ca/enregistrement**NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER**

Nous espérons que vous êtes satisfait(e) de votre nouvel hydropulseur. Si, pour quelque raison que ce soit, vous n'êtes pas satisfait(e) du produit ou

si vous avez des questions sur le produit, veuillez contacter notre équipe du Service à la clientèle, rapide et amicale, basée à Fort Collins, Colorado.

Téléphonez au : 1-888-226-3042
Du lundi au vendredi
De 7 h à 17 h (HNR)Par clavardage ou courriel à :
service@waterpik.com**MODE D'EMPLOI À L'INTÉRIEUR →**

Guide de démarrage rapide

POUR COMMENCER

- 1** Raccordez le câble de recharge au chargeur USB fourni par l'utilisateur. Branchez le chargeur dans la prise murale, branchez l'autre extrémité du câble de recharge à l'unité, puis laissez l'appareil charger.

Laissez l'appareil charger pendant 4 heures avant la première utilisation.**Scannez le code QR ci-dessous ou visitez le site : waterpik.ca/slideFR****GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE À L'INTÉRIEUR →**

Guide de démarrage rapide

POUR COMMENCER

- 1** Raccordez le câble de recharge au chargeur USB fourni par l'utilisateur. Branchez le chargeur dans la prise murale, branchez l'autre extrémité du câble de recharge à l'unité, puis laissez l'appareil charger.

Laissez l'appareil charger pendant 4 heures avant la première utilisation.**Scannez le code QR ci-dessous ou visitez le site : waterpik.ca/slideFR****GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE À L'INTÉRIEUR →**

- Ne pas diriger l'eau sous la langue, dans l'oreille, le nez ou d'autres zones sensibles. Ce produit est capable de produire des pressions qui peuvent causer des dommages graves dans ces zones. L'amiante potentiellement mortelle, *Naegleria fowleri*, peut être présente dans l'eau du robinet ou l'eau de puits non chlorée et peut être mortelle si l'eau est dirigée dans le nez ou l'oreille.
- Utiliser ce produit uniquement comme indiqué dans ces instructions ou selon les recommandations de votre professionnel des soins dentaires.
- Un chargeur USB fourni par l'utilisateur et répondant aux spécifications suivantes est nécessaire pour charger ce produit : USB Type A, sortie nominale : 5,0 Vcc, 1,0 A.
- Ne pas brancher cet appareil dans une prise de courant ayant une tension différente de celle indiquée sur l'appareil ou sur le chargeur.
- Remplir le réservoir d'eau tiède ou d'autres solutions recommandées par les professionnels des soins buccodentaires seulement.
- Ne pas utiliser l'hydropulseur pendant plus de 5 minutes par période de deux heures.

- Utiliser uniquement les embouts et accessoires recommandés par Water Pik, Inc.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Si l'embout Pik Pocket™ (non inclus dans tous les modèles) se sépare du manche pour quelque raison que ce soit, jetez l'embout et le manche, et remplacez-les par un nouvel embout Pik Pocket™.
- Ne pas laisser tomber ou insérer un corps étranger dans une ouverture du produit.
- Supervisez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé il doit être remplacé par un cordon ou un ensemble spécial offert chez le fabricant ou son agent de service.
- N'utilisez pas ce produit dans la présence de dommage sur le cordon ou la prise, s'il ne fonctionne pas de façon appropriée, ou s'il a été échappé ou endommagé, ou échappé dans un liquide. Communiquez avec Water Pik, Inc. en composant le 1888-226-3042 ou visitez www.waterpik.ca.

- Retirer tout bijou oral avant d'utiliser ce produit.
- Ne pas utiliser si vous avez une plaie ouverte sur la langue ou dans la bouche.
- Ce produit ne contient aucune pièce électrique pouvant être réparée par le consommateur et ne nécessite aucun entretien.

- Ne pas immerger cet appareil dans un liquide quelconque.
- Ne pas utiliser cet appareil sous la douche, dans une baignoire et ne pas l'immerger dans un liquide quelconque.
- Représentant autorisé dans l'Union européenne
- Marquage CE (Conformité aux exigences de l'Union européenne)
- Marquage UKCA (UK Conformity Assessed, conformité aux exigences de la Grande-Bretagne)
- Marquage RCM (Regulatory Compliance Mark, conformité aux exigences de l'Australie)
- Collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques.

- CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER. TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES SONT LIMITÉES À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE. CERTAINS ÉTATS OU CERTAINES PROVINCES N'AUTORISENT PAS LES LIMITATIONS SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE, PAR CONSÉQUENT, CE QUI PRÉCÈDE POURRAIT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS.**
- POUR LES ÉTATS-UNIS UNIQUEMENT**
- Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non désiré.
- Limitation de responsabilité**
- Cette garantie limitée est votre unique droit pour remédier contre Water Pik, Inc. et celle-ci ne peut être tenue responsable de tout dommage direct ou indirect, accidentel, spécial, conséquent, exemplaire ou autre, incluant, sans s'y limiter, les dommages de propriété survenant à l'issue de toute théorie de recouvrement, y compris statutaire, par contrat ou provenant d'un acte dommageable.
- WATER PIK, INC. REJETTE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPLICITES OU IMPLICITES, DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, CE QUI INCLUT, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE**

- RENONCIATION AU DROIT DE PARTICIPER À DES RECOURS COLLECTIFS OU DE PRÉSENTER DES RÉCLAMATIONS À TITRE DE REPRÉSENTANT.**
- De plus, en achetant, en installant ou en utilisant ce produit, vous acceptez que l'arbitrage soit réalisé sur une base individuelle. Cela signifie que nous, ni nous, ne pouvons adhérer ou consolider les réclamations en arbitrage par ou contre d'autres acheteurs ou utilisateurs de produits Water Pik, Inc. ou le grand public.
- De plus, vous ne pouvez pas plaider devant un tribunal ou arbitrer toute réclamation en tant que représentant ou membre d'un recours collectif ou abusif, qu'il n'ait subi aucune modification ou dommage après son achat, qu'il ait été utilisé conformément aux instructions et uniquement avec des accessoires ou consommables approuvés par Water Pik, Inc. Cette garantie limitée exclut les accessoires et les consommables comme les embouts, etc. Une utilisation avec une tension incorrecte endommagera le produit et ANNULERÀ la garantie.
- L'arbitrage sur toute question est administré par l'American Arbitration Association et dirigé par un arbitre conformément aux règles d'arbitrage de protection des consommateurs de l'American Arbitration Association en vigueur au moment du dépôt de la demande. Le lieu de tous ces arbitrages est le Colorado et tout arbitrage de ce genre est soumis à la Federal Arbitration Act et la loi du Colorado.

Téléphonez au : 1-888-226-3042
Du lundi au vendredi
De 7 h à 17 h (HNR)

Par clavardage ou courriel à :
service@waterpik.com**COMMUNIQUEZ AVEC NOUS @WATERPIK**Téléphonez au : 1-888-226-3042
www.waterpik.ca**waterpik®**

Water Pik, Inc.,
une filiale de
Church & Dwight Co., Inc.
1730 East Prospect Road
Fort Collins, CO 80553-0001 USA
1-800-525-2774
www.waterpik.com
www.waterpik.ca

Conçu et testé aux États-Unis. Fabriqué en Chine.

Numéro du modèle 20032124-F AA
©2022 Water Pik, Inc.

- GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS**
- Water Pik, Inc. garantit au consommateur initial de ce nouveau produit que ce dernier est exempt de vice de matériau et de fabrication pendant une période de 2 ans à compter de la date d'achat. Le consommateur doit fournir le reçu de vente initial de l'achat comme preuve d'achat et le produit complet (sur demande) afin d'appuyer une réclamation dans le cadre de la garantie. Water Pik, Inc. procédera, à sa seule discrétion, au remplacement du produit, à la condition que le produit n'ait pas fait l'objet d'un usage impropre ou abusif, qu'il n'ait subi aucune modification ou dommage après son achat, qu'il ait été utilisé conformément aux instructions et uniquement avec des accessoires ou consommables approuvés par Water Pik, Inc. Cette garantie limitée exclut les accessoires et les consommables comme les embouts, etc. Une utilisation avec une tension incorrecte endommagera le produit et ANNULERÀ la garantie.

- Arbitrage**
- ARBITRAGE EXÉCUTOIRE ET RENONCIATION AU DROIT D'AGIR EN JUSTICE ET AU DROIT À UN PROCÈS PAR JURY**
- Par l'achat, l'installation ou l'utilisation de ce produit, vous acceptez que l'arbitrage soit réalisé sur une base individuelle. Cela signifie que nous, ni nous, ne pouvons adhérer ou consolider les réclamations en arbitrage par ou contre d'autres acheteurs ou utilisateurs de produits Water Pik, Inc. ou le grand public.
- De plus, vous ne pouvez pas plaider devant un tribunal ou arbitrer toute réclamation en tant que représentant ou membre d'un recours collectif ou abusif, qu'il n'ait subi aucune modification ou dommage après son achat, qu'il ait été utilisé conformément aux instructions et uniquement avec des accessoires ou consommables approuvés par Water Pik, Inc. Cette garantie limitée exclut les accessoires et les consommables comme les embouts, etc. Une utilisation avec une tension incorrecte endommagera le produit et ANNULERÀ la garantie.

- RENONCIATION AU DROIT DE PARTICIPER À DES RECOURS COLLECTIFS OU DE PRÉSENTER DES RÉCLAMATIONS À TITRE DE REPRÉSENTANT.**
- De plus, en achetant, en installant ou en utilisant ce produit, vous acceptez que l'arbitrage soit réalisé sur une base individuelle. Cela signifie que nous, ni nous, ne pouvons adhérer ou consolider les réclamations en arbitrage par ou contre d'autres acheteurs ou utilisateurs de produits Water Pik, Inc. ou le grand public.
- De plus, vous ne pouvez pas plaider devant un tribunal ou arbitrer toute réclamation en tant que représentant ou membre d'un recours collectif ou abusif, qu'il n'ait subi aucune modification ou dommage après son achat, qu'il ait été utilisé conformément aux instructions et uniquement avec des accessoires ou consommables approuvés par Water Pik, Inc. Cette garantie limitée exclut les accessoires et les consommables comme les embouts, etc. Une utilisation avec une tension incorrecte endommagera le produit et ANNULERÀ la garantie.

- RÉPARATION/ENTRETIEN**
- Les hydropulseurs Waterpik® ne possèdent pas de pièces électriques réparables par le consommateur et ne requièrent aucun entretien régulier. Pour toutes les pièces et accessoires, rendez-vous sur www.waterpik.ca. Vous pouvez également appeler notre numéro sans frais du service client au 1-888-226-3042.

- NETTOYAGE**
- Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau. Avant de nettoyer l'appareil, débranchez-le de la prise de courant. Nettoyez l'extérieur de l'appareil si besoin au moyen d'un chiffon doux et d'un nettoyant doux non abrasif. Le réservoir d'eau est amovible pour faciliter le nettoyage. Il est recommandé de retirer et de nettoyer le réservoir toutes les semaines.

- INSTRUCTIONS DE RETRAIT DE LA BATTERIE :**
- Si vous avez l'intention de mettre vous-même la batterie au rebut, veuillez suivre les INSTRUCTIONS DE RETRAIT DE LA BATTERIE pour retirer la batterie rechargeable au lithium-ion. Pour toute question, veuillez contacter le service administratif local chargé des déchets.

Vous avez des questions ou vous avez besoin de plus amples renseignements?**Laissez-nous vous aider à démarrer!****COMMUNIQUEZ AVEC NOUS @WATERPIK**

- INSTRUCTIONS COMPLÈTES**
- NETTOYAGE**
- EMBOUTS**
- DÉPANNAGE**
- QUESTIONS FRÉQUENTES**

- RECYCLAGE DES BATTERIES**
- Avertissement : La batterie de ce produit n'est pas remplaçable. Veillez ne pas démonter le produit, sauf si vous souhaitez vous en débarrasser. Sinon, le service de garantie sera annulé.
- Indiquez les numéros de série et de modèle dans toute correspondance. Ces numéros sont indiqués sous la base de l'appareil.
- Pour toute question supplémentaire, visitez le site www.waterpik.ca.

- NETTOYAGE**
- Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau. Avant de nettoyer l'appareil, débranchez-le de la prise de courant. Nettoyez l'extérieur de l'appareil si besoin au moyen d'un chiffon doux et d'un nettoyant doux non abrasif. Le réservoir d'eau est amovible pour faciliter le nettoyage. Il est recommandé de retirer et de nettoyer le réservoir toutes les semaines.

- Le câble de recharge**
- 20030405-1 Blanc
WF-16/WF-17

- Instructions de retrait de la batterie :**
1. Coupez le haut de l'appareil.
2. Coupez le haut de l'appareil.
3. Soulevez la couche de la batterie.
4. Coupez les fils électriques.

- Sortez la batterie du châssis en la faisant glisser. Coupez les fils individuellement (évitez de couper le fil positif et le fil négatif en même temps pour éviter les courts-circuits).**
- La batterie retirée doit être éliminée de manière sécuritaire par un centre de recyclage spécial.**